

Küschall[®] *COMPACT 2.0*

Prisforhandlet i post 4







UNLIMIT YOUR WORLD

Hos Kuschall tror vi på at alt er mulig når man virkelig ønsker det. Den pålitelige og foldbare Compact 2.0 rullestolen gir brukeren alle muligheter for en ny og spennende kjøreopplevelse.

Unlimit your world.

KÜSCHALL COMPACT

Kuschall Compact er den perfekte kombinasjonen av pålitlighet og **høy kvalitet**. Compact 2.0 leveres med tre forskjellige frontrammer; fast, hemi og swingaway med utsvingbare benstøtter. Rammene kan lett tilpasses brukerens behov og bedre komfort. Uansett om det er bruk for et høyere konfigurasjonsnivå eller en mer enkel aktiv rullestol passer Compact 2.0.

HYDROFORMING

Den hydroformede rammen med sine nye linjer tar designet til Compact 2.0 til et helt nytt nivå. Den nye teknikken er mer enn bare desing, den både styrker og øker stivheten. I tillegg får du en moderne og tidløs stol med et ergonomisk grep som letter forflytning og repositionering.

HYDROFORMING

■ Det hydroformede designet gir en robust og sterkt konstruksjon. Det ergonomiske grepet letter forflytning og reposisjonering.

BENSTØTTER

■ Benstøttene svinges lett til sides og kan fjernes. Dette gjør det enklere å ha føttene i bakken, forflytning og eventuell transport av stolen i foreksempel bil.

FOTBRETTENE

■ Benstøttene har slitesterk anti-slip overfalte og klappes lett opp ved forflytning.



Küschall® COMPACT 2.0

FOLDEMEKANISME

- Foldemekanismen gjør det enkelt å folde stolen ved å ta taik i ryggstropp og setetrek. Det kan også bestilles foldbar rygg som tilbehør.

RAMMEKRYSS

- Rammekrysset er spesielt designet for å støtte brukere med nedsatt styrke og sikre at rullestolen enkelt kan foldes ut og settes i sammen igjen.

RETNINGSSSTABIL KJØRING

- Det er enkelt å stille inn forhjulet slik at man holder en stabil kjøreretning.

SVINGHJUL GAFFEL

- En ny og ren design med integrert lager som reduserer ansamling av smuss, ideell for enklere vedlikehold.

EGENSKAPER



SWING AWAY FRONTRAMME

Utsvingbare og avtagbare benstøtter gir god plass til føttene, og forenkler forflytning.




FAST FRONTRAMME

Gjør stolen enda lettere og mer stabil, samtidig som den kan slås sammen.



HEMI FRONTRAMME

Hemi front gjør det mulig å oppnå enda lavere setehøyde.

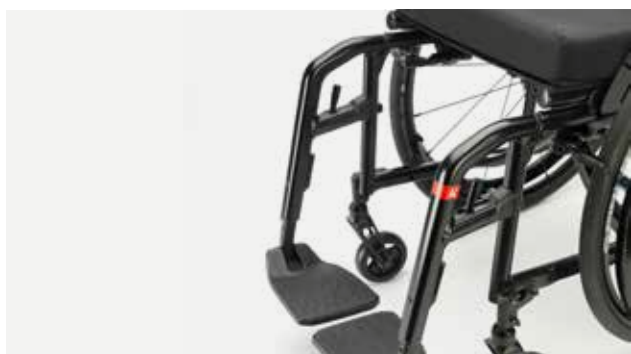

HYDROFORMET RAMME – KVALITET OG LAV VEKT

Den innovative hydroformede rammen gjør Compact 2.0 svært lett og designets utforming gir et behagelig og ergonomisk grep øverst på bensøttene. Denne detaljen gir god støtte under reposisjonering og forflytning.



FOLDBAR OG STABIL

Küschall Compact 2.0 er særdeles stabil, robust og stiv kryssrammestol, som gir meget gode kjøreegenskaper. Rammekrysset gjør at stolen enkelt kan foldes sammen, også av brukere med nedsatt muskelstyrke.



NEDFELLBAR RYGG

Nyheten nedfellbar rygg gjør din Küschall Compact 2.0 enda mer kompakt, og tar enda mindre plass ved transport.



MANGE MULIGHETER

Compact 2.0 har et stort spekter av både størrelser og tilbehør som dekker de fleste behov. Både setehøyde og tippetpunkt kan justeres etter at stolen er levert.

Compact 2.0 er passer veldig godt med både Matrix ryggsystem, Vicair sitteputer og Alber drivagregater. Se tilbehørskatalog for fullstendig oversikt.

EGENSKAPER

STANDARD KONFIGURASJON

- Vinkeljusterbar rygg med velcrobånd
- Faste kjørehåndtak
- 70° utsvingbare benstøtter
- Flip-up fotplater
- Kort armlen med klesbeskytter
- 5" komfort svinghjul
- 24" Active drivhjul med alu drivringer
- 3° camber
- Push bremser
- Tippet sikring



Compact										
	SD320mm	SD340mm	SD360mm	SD380mm	SD400mm	SD420mm	SD440mm	SD460mm	SD480mm	SD500mm
SB280mm	1665485	1665497	1665509	1665521	1665533	1665545	1665557	1665569	1665581	1665595
SB300mm	1665486	1665498	1665510	1665522	1665534	1665546	1665558	1665570	1665582	1665596
SB320mm	1665487	1665499	1665511	1665523	1665535	1665547	1665559	1665571	1665583	1665597
SB340mm	1665488	1665500	1665512	1665524	1665536	1665548	1665560	1665572	1665584	1665598
SB360mm	1665489	1665501	1665513	1665525	1665537	1665549	1665561	1665573	1665585	1665599
SB380mm	1665490	1665502	1665514	1665526	1665538	1665550	1665562	1665574	1665588	1665600
SB400mm	1665491	1665503	1665515	1665527	1665539	1665551	1665563	1665575	1665589	1665601
SB420mm	1665492	1665504	1665516	1665528	1665540	1665552	1665564	1665576	1665590	1665602
SB440mm	1665493	1665505	1665517	1665529	1665541	1665553	1665565	1665577	1665591	1665603
SB460mm	1665494	1665506	1665518	1665530	1665542	1665554	1665566	1665578	1665592	1665604
SB480mm	1665495	1665507	1665519	1665531	1665543	1665555	1665567	1665579	1665593	1665605
SB500mm	1665496	1665508	1665520	1665532	1665544	1665556	1665568	1665580	1665594	1665606

DESIGN

1 VELG RAMMEFARGE



Anthracite grå



Hvit



Space svart



Azurblå



Carmine rød

2 VELG LOGO DESIGN



3 VELG LOGO FARGE



Rød



Svart



Lys grå



Gull



Rød



Blå



Mørk grå



Svart

TEKNISKE DATA

SETEBREDDE

280 – 500 mm
i steg på 20 mm



SETEDYBDE

320 – 500 mm
i steg på 20 mm



LENGDE KNE TIL HÆL

200 - 510 mm
i steg på 10 mm



HØYDE RYGG

300 – 510 mm
i steg på 15 mm



VINKEL RYGG

82°/86°/90°/
94°/98°/102°



SETE HØYDE

Foran: 380 - 530 (swing away
front ramme)
440 - 520 (fast front ramme)
370 - 430 (hemi front ramme)
Bak: 360 – 500 mm
i steg på 10 mm



FRONTRAMME VINKEL

70° / 80°



TOTAL BREDDDE

SB + 160 mm



TOTALBREDDDE FOLDET

ca. 290 mm



TOTAL LENGDE

70°: ca. 870 – 1220 mm
80°: ca. 850 – 1200 mm



CAMBER

0° / 3°



PRODUKT VEKT

Ca. 10.5 kg (avtagbare benstøtter)
Ca. 9.6 kg (fast frontramme)



TRANSPORT- VEKT

Ca. 7.8 kg (avtagbare benstøtter)
Ca. 6.7 kg (fast frontramme)



MAKS BRUKERVEKT

130 kg



TESTING

Oppfyller krav til crash
testing med nakkestøtte jmf
ISO 7176-19



Opgitt totalvekt og transportvekt er basert på setebredde 400 mm og setedybde 400 mm i den letteste og mest kompakte konfigurasjonen. Vekt og dimensjon kan endres med forskjellige konfigurasjoner. For mer informasjon, se bruksanvisningen på vår hjemmeside.

K

/ UNLIMIT YOUR WORLD

Kundeservice: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Pb. 6230 Etterstad
0603 Oslo

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world and Compact are trademarks of Invacare International GmbH. Every effort has been made to ensure that the contents of this publication are fully up-to-date at the time of going to print. As part of its ongoing improvement of products, Invacare International GmbH reserves the right to modify existing models at any time.
© July 2019, Invacare International GmbH. All rights reserved. NO